

# Изобразяване на резултати

Изобразяването на резултати е сложна задача и обикновено има два аспекта - изобразяване на екран и на хартия. Тук се спираме на показването на екран, доколкото то е по-важно, а и предвид обичайното ограничение до степени на сиво при хартията, показването на екран е по-сложно.


## Изобразяване на екран

В примера по-долу е показано изобразяване на визита в iLab Courier (приложение с което се валидират и изпращат към БИС резултати). Следва да се обърне внимание на няколко детайла:

- В главата - **едър шрифт главните данни** - име, пол и възраст;
- В детайлите - **тестовете са групирани** в групи;
- Вляво е показан **статуса готов/неготов** (червен **X** и зелен **✓**, според [OBX-11](#));
- С различен **градиент на отенъци на червено/синьо** са показани резултати **над/под референтни граници** (според [OBX-8](#));
- С **градиент на сиво** е показан резултат, който **не може да бъде изработен** (статус X и резултат \*).

**Иван Петров Георгиев, М, 55 г.**

16790 | 13.11.2017 г. 14:42 | Клинични пътеки | MISHONP | MishoKOC  
 Йовчев, Александър Трифонов, Хирургия  
 Обща Хирургия

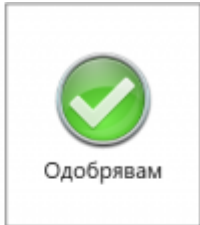

Тест	Резултат	Единици	Реф. граници
<b>Хематология</b>			
✘ Лейкоцити		10 <sup>9</sup> /L	3.50 - 10.50
✘ Lym %		%	22.0 - 44.0
✘ Lym #		10 <sup>9</sup> /L	0.77 - 4.62
✘ Еритроцити		10 <sup>12</sup> /L	4.20 - 5.40
✘ Хемоглобин		g/L	135 - 172
✘ Хематокрит		L/L	0.380 - 0.540
✘ MCV		fL	82.0 - 92.0
✘ MCH		pg	28.0 - 33.0
✘ MCHC		g/L	320 - 360
✘ Тромбоцити		10 <sup>9</sup> /L	140 - 440
✘ MPV		fL	6.5 - 12.0
✘ PDW		fL	9.0 - 17.0
✘ PCT			0.108 - 0.282
✔ СУЕ	*	mm/h	2 - 37
<b>Биохимия</b>			
✔ Глюкоза	5.8	mmol/l	3.30 - 6.40
✔ Урея	26	mmol/l	1.7 - 8.3
✔ Креатинин	62	umol/L	74 - 127
✔ Общ белтък	25	g/L	60.0 - 84.0
✔ Общ билирубин	32	umol/L	3.4 - 21.0
✔ АсАТ	33	U/l	0 - 50
✔ АлАТ	30	U/l	0 - 48

**Разпечатка**

При изобразяване на хартия (разпечатка) следва флагираните (патологични) резултати да се печатат с **чер**, евентуално със знак преди името на теста. В примера по-долу е показан същия резултат като на горния, но във вариант разпечатка.

**МБАЛ Градска ЕАД**

гр. Мечта, ул. Независимост 22 e-mail: drams@hospital.bg

**13.11.2017** Иван Петров Георгиев (М, 55 г.)ID **16790**

Лекуващ лекар Йовчев, Александър-Хирургия

Фонд/Клиника 1 Обща Хирургия

Забележка:

Ако не е посочено друго, референтните граници са за пол Мъж, възраст 55 г.

Хематология			
Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Пълна Кръвна Картина	Профил *	*	*
Левкоцити		10 <sup>9</sup> /L	3.50 - 10.50
Лут %		%	22.0 - 44.0
Лут #		10 <sup>9</sup> /L	0.77 - 4.62
Еритроцити		10 <sup>12</sup> /L	4.20 - 5.40
Хемоглобин		g/L	135 - 172
Хематокрит		L/L	0.380 - 0.540
MCV		fL	82.0 - 92.0
MCH		pg	28.0 - 33.0
MCHC		g/L	320 - 360
Тромбоцити		10 <sup>9</sup> /L	140 - 440
MPV		fL	6.5 - 12.0
PDW		fL	9.0 - 17.0
PCT			0.108 - 0.282
* СУЕ		* mm/h	2 - 37

Биохимия			
Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Глюкоза	5.8	mmol/l	3.30 - 6.40
↑↑ Урея	26	mmol/l	1.7 - 8.3
↓ Креатинин	62	umol/L	74 - 127
↓↓ Общ белтък	25	g/L	60.0 - 84.0
↑ Общ билирубин	32	umol/L	3.4 - 21.0
АсАТ	33	U/l	0 - 50
АлАТ	30	U/l	0 - 48

**Край на справката**

Внимание : Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание, може да бъде опасно за Вашето здраве. Моля, обръщайте се за търкуване на резултатите само към квалифицирани лекари. МБАЛ Градска ЕАД препоръчва винаги да показвате резултатите си на лекуващия си лекар !

Можете да свалите примерния

резултат в PDF

From:  
<https://hl7.skyware-group.com/> - iLab HL7 Wiki

Permanent link:  
<https://hl7.skyware-group.com/doku.php?id=res-rend>

Last update: **2017/11/13 17:49**

